

LYMPHATREX®

Kompressionskleidung
zur Ödemtherapie
Sanfter Druck mit starker Wirkung



THUASNE

Dauerhafte Therapieerfolge durch individuelle Versorgungsmöglichkeiten

Kompression ist zusammen mit Lymphdrainage, Hautpflege und Bewegungstherapie ein zentraler Baustein der Ödemtherapie. In der Optimierungs- und Konservierungsphase der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie (KPE 2) kommen flachgestrickte Versorgungen aus kurzzügigen Materialien, die speziell nach den Maßen der Patienten gefertigt werden, zum Einsatz.

Neben ausgewählten hautverträglichen Materialien, die den gewünschten therapeutischen Effekt gewährleisten, tragen vor allem eine optimal den anatomischen Gegebenheiten entsprechende Passform und eine hochwertige Verarbeitung zur Compliance bei. Grundlage dafür, dass Patientinnen und Patienten ihr Kompressionskleidungsstück selbstbewusst und regelmäßig tragen, sei es ein Strumpf oder eine Zehenkappe, eine Armbandage oder eine Oberkörperversorgung.

LYMPHATREX® stärkt die Akzeptanz durch angenehmen Tragekomfort, nahtlose anatomische Anformung in den Gelenkpartien, hohe Hautverträglichkeit und dezente Farbtöne.

THUASNE bietet passgenaue Maßanfertigungen. Unser hilfsbereiter Service berät Sie kompetent bei Fragen zur Versorgung des oft äußerst anspruchsvollen Krankheitsbildes, zum Maßnehmen bei Patientinnen und Patienten sowie bei Fragen zur Lieferung.

Indikationen

- primäres oder sekundäres Lymphödem
- Lipödem
- Lipo-Lymphödem
- Phlebo-Lymphödem
- Stauungszustände infolge Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)

LYMPHATREX® – Lebensqualität durch wirksame Kompression



Beratung und Service – In guten Händen

Beraten

LYMPHATREX® Kompressionsprodukte sind im Alltag von Patientinnen und Patienten mit Lympherkkrankungen wichtige Begleiter. Sie sichern wirksam das Entstauungsergebnis und unterstützen mit ihrer grobmaschigen Struktur und den kurzzügigen Materialeigenschaften andere Bausteine der KPE, wie die Bewegungstherapie.

Um eine dauerhafte Verbesserung zu erzielen, ist es wichtig, dass das Kompressionsteil regelmäßig getragen wird. Denn nur so wird der gewünschte Effekt erzielt. Eine einfühlsame und kompetente Beratung ist von entscheidender Bedeutung, denn LYMPHATREX® ist so individuell wie der Patient selbst.

Wir unterstützen Sie umfassend, sowohl bei Fachfragen, die das Material und das Maßnehmen betreffen, als auch bei allen praktischen Fragen zur Bestellung, zum Anlegen und zum Tragen der Kompressionsteile.

Anpassen

Wir vertiefen Ihre Kenntnisse vom exakten Maßnehmen und trainieren Sie mithilfe der übersichtlichen Maßformulare. Wir bereiten Sie sorgfältig auf die speziellen Bedürfnisse von Patienten mit teilweise sehr anspruchsvollen lymphologischen Krankheitsbildern vor.

Das Maßnehmen schafft eine Vertrauensbasis zwischen dem Patienten und Ihnen und legt den Grundstein für die Akzeptanz von LYMPHATREX® Kompressionsteilen aufseiten des Patienten.

Auswählen

LYMPHATREX® Kompressionsteile bieten eine gezielte Auswahl an hoch spezifischen Materialien mit jeweils hervorragenden Eigenschaften für die unterschiedlichen medizinischen Anforderungen und Tragebedürfnisse.

LYMPHATREX® Fine lässt sich leicht anziehen und zeichnet sich durch beste Hautverträglichkeit und einen hervorragenden Tragekomfort aus.

LYMPHATREX® Poly ist für die aktiveren Patientinnen und Patienten gedacht. Die angenehm zu tragende Polyamid-Microfaser lässt Schweiß leicht verdunsten und ist in der Pflege sehr schnell trocknend. Beide Materialien werden in der Kompressionsklasse 2 verarbeitet.

Sollte das Stadium des zu behandelnden Ödems stärkere Kompression erfordern, ist unsere Strong-Qualität Poly Strong die beste Wahl. Durch einen höheren Elasthananteil im Gestrück können hier höhere Kompressionsklassen gefertigt werden, ohne bei den ausgezeichneten Trageeigenschaften Abstriche hinnehmen zu müssen.

Die verschiedenen Materialformen sind lieferbar in zwei Farben. Alle Ausstattungsoptionen werden individuell ausgewählt und angepasst.

Anfertigen

Voraussetzung für ein perfekt sitzendes LYMPHATREX® Kompressionsteil ist die Anfertigung nach Maß.

Aus den individuell genommenen Körpermaßen wird das Strickmuster entworfen, das direkt an unsere Fertigungsmaschinen weitergeleitet wird. Selbst unser Serienstück, der LYMPHATREX®-BH, ist so individuell wie seine Nutzerin. 30 verschiedene Seriengrößen, verstellbare Träger und optionale Epithesentaschen sorgen dafür, dass er seinen therapeutischen Zweck optimal erfüllt und angenehm zu tragen ist.

Trainieren

Den wichtigen Arbeitsschritt des Maßnehmens und der Wahl der richtigen Ausstattungsoptionen trainieren wir mit Ihnen in speziellen Workshops. Sie erwerben Fachwissen für die individuelle Versorgung und Kompetenz im Umgang mit Ödempatienten. Unser kompetentes Team im Innen- und Außendienst steht Ihnen darüber hinaus gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Materialoptionen für jeden Anspruch

Rundumversorgung mit LYMPHATREX® durch


- ▷ umfassende Beratung
- ▷ exaktes Anpassen
- ▷ praktisches Training
- ▷ präzise Fertigung
- ▷ optimale Materialeigenschaften
- ▷ individuelle Ausstattung

Farb- und Materialauswahl

Drei angenehm anzuziehende Materialien mit hervorragenden Trageeigenschaften und bester Hautverträglichkeit ermöglichen eine Versorgung, die auf eine optimale Therapie in der konkreten Lebenssituation ausgerichtet ist. Die Wahl zwischen einem neutralen Beigeton und dezentem Schwarz trägt zur Akzeptanz der Versorgung bei.

Tragekomfort

Eine optimale Passform wird durch anatomische Strickung erreicht. Zahlreiche Ausstattungs- und Befestigungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Kompressionsbekleidung leicht anzuziehen ist, sicher hält und nicht einschnürt: auf die Kleidung abgestimmte Verschlüsse, wie mit Haken und Ösen unterlegte Reißverschlüsse oder doppelte Ösenreihen. Vielfältige, auch kombinierbare Befestigungsmöglichkeiten vom Haftbandstück bis zu Taillengurt oder BH-Schleufe und individuell geformten Pelotten, z. B. für die Malleolen. Einarbeiten von Silon-TEX® zur ergänzenden Narbentherapie, z. B. in die Brustkörbchen.

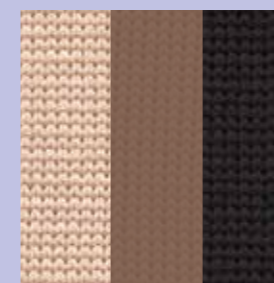

LYMPHATREX® Fine


49 % Polyamid, 33 % Tergal, 18 % Elasthan

Kl. 2

Hoher Tragekomfort, leichtes Anziehen. Ödeme bis Stadium 2



Schräger Abschluss

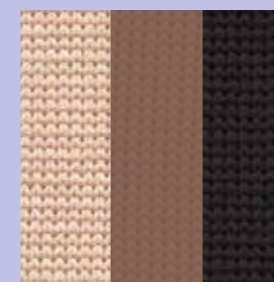

LYMPHATREX® Poly


82 % Polyamid, 18 % Elasthan

Kl. 2

Für aktive Patienten. Leichtes Anziehen, schnelles Trocknen. Ödeme bis Stadium 2



Anatomisch gestricktes Knie

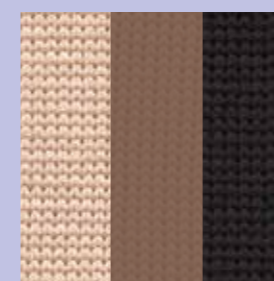

LYMPHATREX® Poly Strong

73 % Polyamid, 27 % Elasthan

Kl. 2, 3

Für aktive Patienten. Schnelles Trocknen. Ödeme bis Stadium 3



Anatomische Ferse



ARION Anziehhilfen

(über THUASNE ausschließlich in der EU erhältlich)



Anziehhilfe

Individuell auf Sie zugeschnitten

Für ein LYMPHATREX® Kleidungsstück nehmen Sie beim Patienten die Körpermaße unter Zug. Anschließend tragen Sie die ermittelten Werte in unser Online-Maßportal ein oder übermitteln sie per Fax. Unser computergestütztes CAD/CAM-System übernimmt diese Daten für die Berechnung der Maßkleidung. Gern erstellen wir Ihnen auf Grundlage der konkreten Maße und Optionen bei Bedarf zunächst einen verbindlichen Kostenvoranschlag zur Einreichung beim Leistungsträger.

Abhängig vom gewählten Material werden dann die notwendigen Parameter direkt an einen Strickautomaten weitergeleitet. So kann das Kompressionskleidungsstück passgenau gestrickt werden.

Der digitale Workflow beschleunigt die Herstellung und Lieferung des Kompressionskleidungsstücks erheblich.

Der Patient erhält so schnell wie möglich sein individuell gefertigtes LYMPHATREX® Kleidungsstück und hat von Anfang an die Sicherheit, dass ihn diese „zweite Haut“ stützen und begleiten wird.

Mit Sicherheit zur passenden Versorgung - das THUASNE-Passform-Versprechen

Für alle nach unserem Maßschema angemessenen Versorgungen übernimmt THUASNE, neben der sechs-monatigen Garantie auf Material und Wirksamkeit, die Verantwortung für gute Passform und optimalen Sitz.

Eventuell erforderliche Anpassungen bis hin zum Ersatz werden innerhalb des ersten Monats nach Versand kostenlos von uns ausgeführt.

Auch darüber hinaus entstehende Anliegen behandeln wir unkompliziert und lösungsorientiert. Sprechen Sie uns an!

1. Schritt: Maßnehmen

Genaueres Ausmessen der betroffenen Körperregionen unter Zug – die Grundlage für eine passgenaue Anfertigung des Kompressionskleidungsstücks.



2. Schritt: Datenübermittlung

Die Maße werden auf einem Bestellblatt gefaxt oder direkt über unser Online-Maßportal eingegeben.



3. Schritt: Berechnung

Im computergestützten CAD/CAM-System erfolgt die Berechnung der Maßkleidung.




4. Schritt: Fertigung

Die errechneten Parameter werden direkt an einen Strickautomaten weitergeleitet.



LYMPHATREX® Maßprogramm

Druck-Dehnungskurve

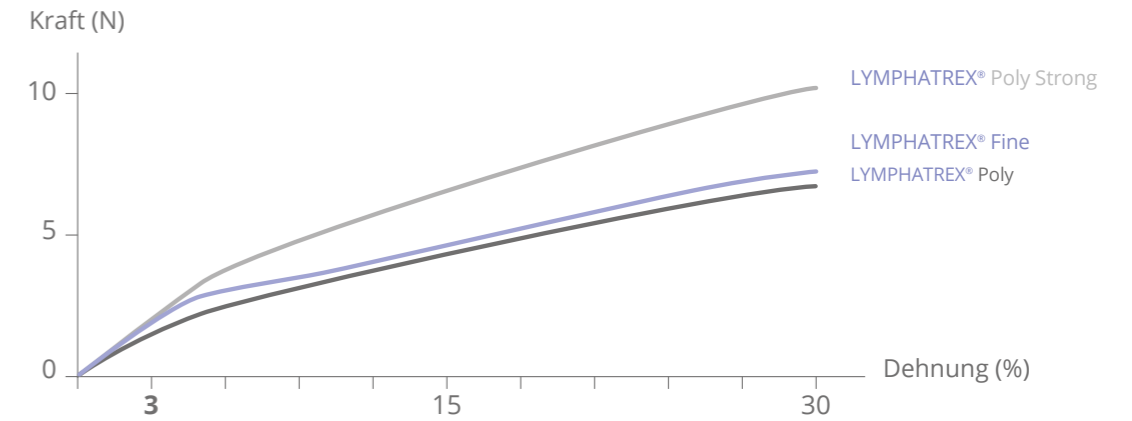

Oberkörper

erhältlich in:
LYMPHATREX® Fine Kl. 2
LYMPHATREX® Poly Kl. 2



mit H/Ö vorn und Schrittgurt

Weste

- mit einem Verschluss auf Brust / Rücken
- Körbchen mit Unterbruststreifen für besseren Halt und Passform
- optional mit Epithesen-Tasche im Cup
- Einnähen von Silon-TEX® zur kombinierten Lymph-/Narbentherapie möglich



mit RV eingenäht vorn, kurzen Ärmeln, Haftbandstücken

Jacke

- in verschiedenen Armlängen
- mit einem Verschluss auf Brust / Rücken
- Körbchen mit Unterbruststreifen für besseren Halt und Passform
- optional mit Epithesen-Tasche im Cup
- Einnähen von Silon-TEX® zur kombinierten Lymph-/Narbentherapie möglich

Hand/Arm

erhältlich in:
LYMPHATREX® Fine Kl. 2
LYMPHATREX® Poly Kl. 2



mit offenen Fingern

Handschuh

- ohne Finger oder mit Fingern offen / geschlossen
- individuelle Stulpenlänge
- kombinierbar mit Armstrumpf



mit anatomischem Ellbogen und BH-Schleufe

Armbandage

- in verschiedenen Längen
- kombinierbar mit Handschuh
- Befestigungsoptionen: Haftband, Haftbandstücke, BH-Schleufe / Schultergurt

Bauch/Bein/Fuß

erhältlich in:
LYMPHATREX® Poly Kl. 2
LYMPHATREX® Poly Strong Kl. 2 / 3



C-T Schritt geschlossen, eingenähter RV vorne, Tailenband, Knie anatomisch



F-T Schritt geschlossen, Haftbandstücke an Taille

Hose

- mit offenem / geschlossenem Schritt
- in verschiedenen Beinlängen
- auch mit Fuß, Spitze offen / geschlossen



A-G Spitze geschlossen, schräger Abschluss, Noppenhaftband



A-F Spitze offen, Y-Ferse komprimiert, schräger Abschluss, Noppenhaftband 5 cm

Oberschenkelstrumpf/ Halbschenkelstrumpf

- mit offener / geschlossener Spitze
- A-F, A-G
- Befestigungsoptionen: Haftband, Haftbandstücke, Hüftbefestigung (nur AG)
- in Kombination mit Hose tragbar



A-D Spitze offen, schräger Abschluss, schmales Noppenhaftband

Wadenstrumpf

- mit offener oder geschlossener Spitze
- mit Zehen offen / geschlossen
- Befestigungsoptionen: Haftband, Haftbandstücke,
- in Kombination mit Hose tragbar



A-A1 Zehen offen

Zehenkappe

- mit Zehen offen / geschlossen
- in Kombination mit Strumpf tragbar

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de · www.thuasne.de

Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980

Kundenservice-Hotline: Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

Kundenservice Serienprodukte:
Tel.: +49 5139 988-205 · Fax: +49 5139 988-177

Kundenservice Maßprodukte:
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980



TM13431BDD_09170128