



THUASNE

Genu FS

Sanfte Korrektur für eine
verbesserte Patellaführung

Genu FS

Knieorthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges



Silikonfäden im oberen Gestrickrand reduzieren das Rutschen der Orthese.

Atmungsaktives Gestrück mit 3D-Struktur sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.

Einfache und schnelle Korrekturstellung

Flex-Air Pelotte zur Führung der Kniescheibe.

Elastizität und mehr Komfort durch extra weiches Gestrück im Bereich der Kniekehle.

Individuell kürzbarer Wadengurt zur Korrekturstellung, sorgt für einen sicheren Sitz und minimiert das Rutschen der Orthese.

Genu FS im Detail

- Einfache und schnelle Korrekturstellung
- Direkte Kraftübertragung
- Kompressives Gestrück
- Wadengurt



FlexAir-Pelotte

Trigonale Elemente sorgen dafür, dass sich die Pelotte bei jeder Bewegung optimal an die Körperform anpasst.




Silikonfäden im oberen Gestrückrand

Sorgen für einen angenehm festen Sitz am Bein und reduzieren das Rutschen der Orthese.



Korrekturzügel


Einfach und schnell einstellbar, für eine zuverlässige Korrekturstellung.

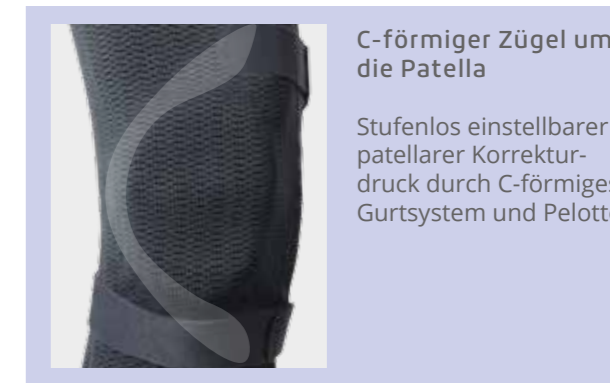

C-förmiger Zügel um die Patella

Stufenlos einstellbarer patellarer Korrekturdruck durch C-förmiges Gurtsystem und Pelotte.

Indikationen	Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z.B.:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Femoropatellares Schmerzsyndrom • Patellahochstand • Patellalateralisation 		
Wirkungsweise	Korrigierende Führung durch individuell einstellbares Zugsystem und C-förmigen Zügel zur Kraftübertragung.		
Farbe	Anthrazit		
Ausführung	Links oder rechts		
Größe	Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
	XS	38 - 41	28 - 31 cm
	S	41 - 44	31 - 34 cm
	M	44 - 47	34 - 37 cm
	L	47 - 50	37 - 40 cm
	XL	50 - 53	40 - 43 cm
	XXL	53 - 56	43 - 46 cm
Art.-Nr.	35 043		
HMV-Nr.	23.04.05.0017		

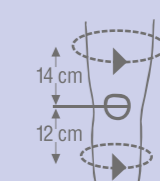

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de · www.thuasne.de

Kundenservice-Hotline: Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
Kundenservice Allgemein: Tel.: 0800 8482763
Kundenservice Serienprodukte:
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177

