

MOBIDERM® Kits

Die erprobten Komplettlösungen



Zur Mobilisierung des Unterhautgewebes mit gleichzeitig größtmöglicher Mobilität in der Entstauungsphase

Behandlungs-Pakete zur Entstauung durch Mobilisierung in der Ödemtherapie

- Indikation**
- Behandlung von Ödemen und Lymphödemen
 - Drainage von Hämatomen
 - Lockerung von Fibrosen

Version **MOBIDERM® Kit 1 Arm**

- Inhalt:
- 1 x Biflex Binde 8 cm x 3 m
 - 1 x Biflex Binde 8 cm x 5 m
 - 1 x Cotton Short Stretch Binde 11 cm x 4 m
 - 2 x MOBIDERM® Binde 10 cm x 3 m (gr. Würfel)

Art.-Nr. 37009029999905
PZN 07034858

Version **MOBIDERM® Kit 2 Bein**

- Inhalt:
- 1 x Biflex Binde 8 cm x 3 m
 - 1 x Biflex Binde 10 cm x 3 m
 - 1 x Biflex Binde 10 cm x 5 m
 - 2 x Cotton Short Stretch Binde 11 cm x 4 m
 - 3 x MOBIDERM® Binde 10 cm x 3 m (gr. Würfel)

Art.-Nr. 37009029999906
PZN 07034901



THUASNE

WINGS FOR YOUR HEALTH

MOBIDERM® AUTOFIT

Die komfortable
Lösung bei
Lymphödemen

Leicht anzulegen,
bequem zu tragen,
ohne aufwendiges
Wickeln



Thuasne Deutschland GmbH
Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
www.thuasne.de · kundenservice@thuasne.de

Kundenservice
Tel.: +49 5139 988-205 · Fax: +49 5139 988-177

Hauptstraße 16 · 35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180



TM1343203BDD01_1.0_2023-04

Was ist MOBIDERM®?

MOBIDERM® ist ein Medizinprodukt aus Schaumstoffwürfeln, die von zwei Vliesbandagen umhüllt sind.




MOBIDERM® kann unter einer Kompressionsbandagierung (als Bandage oder Platte) oder eingearbeitet in mobilisierenden Kleidungsstücke angewendet werden.

Durch den Druckunterschied zwischen der Auflagefläche der Schaumstoffwürfel und der angrenzenden Umgebung wird der Lymphabfluss verbessert und die Wirksamkeit der Lymphdrainage verstärkt.

MOBIDERM® mobilisiert auch die fibrotischen und sklerotischen Hautbereiche durch den Zügeffekt auf das ödematöse Unterhautgewebe.

Wirkschema

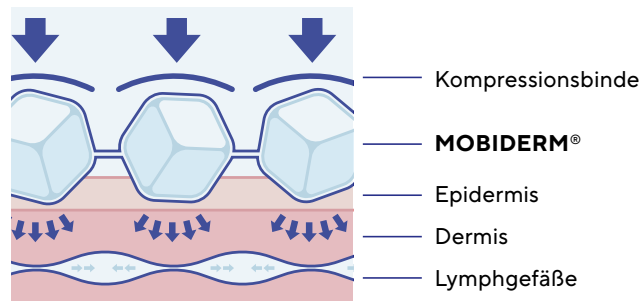

• Effektiv

- Schnelle Reduzierung des Lymphödemvolumens
- Lockerung von fibrotischer, sklerotischer oder ödematöser Haut

• Praktisch

Leicht, komfortabel und flexibel, der Patient behält seine Bewegungsfreiheit und somit wird die Lymphdrainage angeregt.

• Komfortabel

- Weiche Hautauflage
- Anschließbar für verbesserten, anatomisch korrekten Sitz

Was ist MOBIDERM® autofit?



MOBIDERM® autofit ist ein Kompressionsmedizinprodukt zur Behandlung von Lymphödemen.

Mit MOBIDERM® autofit stabilisieren Patienten die Ergebnisse der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie (KPE). Denn auch in der Erhaltungsphase ist es wichtig, dass Sie Ihren Körper unterstützen. MOBIDERM® autofit als individuell einstellbarer Arm-, Waden- oder Oberschenkelstrumpf sind Produkte, die einen spürbaren Erfolg hinterlassen. MOBIDERM® autofit kann als Nacht- oder tagsüber als Ruheversorgung angewendet werden. Regelmäßig angewendet, verhindert MOBIDERM® autofit den gefürchteten Rebound-Effekt: die Verschlimmerung der Symptome nach der Entstauung.

Sie können Ihren aktiven Beitrag dazu leisten, wenn Sie regelmäßig Ihre Kompressionskleidung MOBIDERM® autofit tragen. So ergänzen Sie optimal die Tagversorgung mit Kompressionsprodukten von THUASNE. 82 % der Patienten, die bereits Kompressionskleidung tragen, bevorzugen laut der

MARILYN-Studie MOBIDERM® autofit.

Alle MOBIDERM® autofit Produkte lassen sich an die individuelle Morphologie eines jeden Patienten sowie Veränderungen im Therapieverlauf anpassen.

Für welche Patienten ist MOBIDERM® autofit geeignet?

- Für alle Stadien des Lymphödems
- Während der Erhaltungsphase
- Bei fortgeschrittenem Lymphödem
- Für eine selbständige Kontrolle des Lymphödems
- Für eine sofortige Versorgung

Armstrumpf



Halboffene Konstruktionen
einfach zum An- und Ausziehen



Variabel einstellbare Klettverschlüsse mit markierten Befestigungszonen
zur leichten Reproduktion der Einstellung und visuellen Kontrolle von Veränderungen im Lymphödemvolumen



Rutschfeste Sohle, bzw. zu öffnendes Handteil
bequeme Alltagsanwendung

Waden- oder Oberschenkelstrumpf

