



THUASNE®

NEU

Die neue GO-Serie:

Wirksam. Komfortabel.
Ästhetisch.

Genu-GO Silistab®
Kniegelenkbandage

Malleo-GO
Sprunggelenkbandage

Epi-GO
Ellenbogenbandage

Manu-GO
Handgelenkbandage



Die vier neuen GO-Bandagen von Thuasne®

Mit effektiven und komfortablen Lösungen den Alltag von Patienten spürbar erleichtern – unsere neue GO-Serie vereint Funktion und Qualität mit modernem Design.

WAS IST NEU?

▶ LEICHTIGKEIT

Erhöhter Tragekomfort und verbesserte Beweglichkeit durch besonders leichte, flexible Materialien kombiniert mit atmungsaktivem Gestrick.

▶ ERGONOMIE

Vereinfachte Handhabung durch neugestaltete Zuglaschen.

▶ ÄSTHETIK

Funktionalität vereint mit ästhetischem Design durch elegante, dunkle Blautöne.

ENTDECKEN SIE DIE
NEUE GO-SERIE*

Genu-GO Silistab®



Malleo-GO



Epi-GO



Manu-GO



* Bitte beachten Sie die Produktspezifikationen

Die neuen GO-Bandagen von Thuasne® – ausgerichtet an den Bedürfnissen der Patienten

WIRKUNGSWEISE

Kompression, Stabilisierung & Propriozeption

- Flächige, gleichmäßige Druckverteilung durch elastisches Gestrick mit multidirektionaler Dehnung¹
- Reduktion von Ödemen und verbesserte Resorption (Rücktransport der Flüssigkeit aus dem Gewebe) durch kompressiven Effekt¹
- Mehr Stabilität bei Bewegung durch verbesserte propriozeptive Wirkung²
- Entlastung und Schmerzreduktion durch integrierte Pelotten (gezielte Druckapplikation)




Kompression



Stabilisierung



Propriozeption

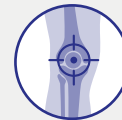

Gezielter Druck

KOMFORT

Anatomische Formgebung

- Elastisches, hautfreundliches Gestrick passt sich optimal an die anatomische Grundform an

Atmungsaktives Gestrick

- Atmungsaktive Gewebestruktur fördert den Tragekomfort bei alltäglichen sowie sportlichen Aktivitäten^{1,3}

Leichte Materialien

- Gewichtsreduktion durch Polymer-Pelotte vs. TPE-Pelotte (AirFlex, TPE = thermoplastisches Polymer)

Neuartige Pelottentechnologie

- Verbesserte anatomische Formgebung und gleichmäßige Druckverteilung durch neue Polymer-Pelotten mit weichen und flexiblen Eigenschaften
- Erhöhte Luftzirkulation durch die offenporige Struktur des Polymers für ein angenehmes Tragegefühl

Sicherer Halt

- Anti-Rutsch-System hält die Bandage in Position

Einfache Handhabung

- Ergonomische Zuglaschen erleichtern das Anlegen
- Beidseitige Anwendung durch links-rechts Symmetrie

¹ Daten zur CE-Kennzeichnung

² CAPROG-Studie 2022, durchgeführt an einer ähnlichen Kompressions-Kniebandage (GenuAction)

³ IN2103 – Evaluierung RET (Juli 2021)

Genu-GO Silistab®

Kniebandage zur Entlastung
und Stabilisierung



INDIKATIONEN

DEGENERATIVE POSTTRAUMATISCHE ODER
POSTOPERATIVE WEICHTEILSCHÄDIGUNG DES
Kniegelenkes UND/ODER REZIDIVIERENDER
GELENKERGUSS

WIRKUNGSWEISE

Kompression¹

- Elastisches 3D-Kompressionsgestrick
23-32 mm Hg/31-43 hPa RAL Class II

Stabilisierung

Propriozeption²

Patellaführung

- Ovale Ausführung der integrierten Pelotte
sichert den Patellagleitweg¹
- Y-Form der Pelotte mit Hohlrinne
entlastet die Patellasehne

KOMFORT

Anatomische Formgebung

- Weicheres, flexibleres Gestrick im
Kniekehlenbereich erhöht den Trage-
komfort bei Kniebeugung und ver-
hindert Druck auf die Blutgefäße

Atmungsaktives Gestrick³



Leichte Materialien⁴

Neuartige Pelottentechnologie

Sicherer Halt

- Seitliche Flachspiralfedern stabilisie-
ren das Gelenk und verhindern Falten-
bildung¹

Einfache Handhabung

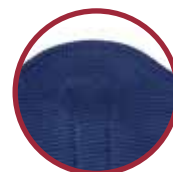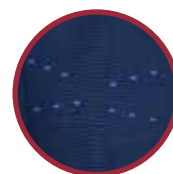

¹ Daten zur CE-Kennzeichnung

² CAPROG-Studie 2022, durchgeführt an einer ähnlichen Kompressions-Kniebandage (GenuAction)

³ IN2103 - Evaluierung RET (Juli 2021)

⁴ Gewichtsreduktion durch Polymer-Pelotte vs. TPE-Pelotte (AirFlex, TPE = thermoplastisches Polymer)

Malleo-GO

Sprunggelenkbandage
mit propriozeptivem Effekt



INDIKATIONEN

LEICHTE VERSTAUCHUNG DES KNÖCHELS
(AKUTE PHASE), POSTOPERATIVE/POSTTRAUMATISCHE
RESTSCHMERZEN UND/ODER -ÖDEME,
GELENKINSTABILITÄT/-LAXITÄT

WIRKUNGSWEISE

Kompression¹

- Elastisches 3D-Kompressionsgestrick
20-36 mmHg/27,1-48 hPa RAL Class II

Stabilisierung

Propriozeption

KOMFORT

Anatomische Formgebung

Atmungsaktives Gestrick²

Leichte Materialien³

Neuartige Pelottentechnologie

Sicherer Halt

Einfache Handhabung

- Schmale Passform für viele Schuhe
geeignet



¹ Daten zur CE-Kennzeichnung

² IN2103 – Evaluierung RET (Juli 2021)

³ Gewichtsreduktion durch Polymer-Pelotte vs. TPE-Pelotte (AirFlex, TPE = thermoplastisches Polymer)

Epi-GO

Ellenbogenbandage
zur Schmerzlinderung



INDIKATIONEN

LATERALE ODER MEDIALE EPICONDYLITIS (TENNISARM/
GOLFARM), VORBEUGUNG VON WIEDERKEHRENDEN
TENDINOPATHIEN (SEHNENLEIDEN) AM ELLENBOGEN

WIRKUNGSWEISE

Kompression¹

- Elastisches 3D-Kompressionsgestrick

Stabilisierung

Propriozeption

KOMFORT

Anatomische Formgebung

- Weicheres Gestrick im Bereich der Ellenbeuge für einen angenehmen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- Verlängerter Bereich zum Oberarm für eine verbesserte Passform und kompressive Wirkung

Atmungsaktives Gestrick²

Leichte Materialien³

Neuartige Pelottentechnologie

Sicherer Halt

Einfache Handhabung



¹ Daten zur CE-Kennzeichnung

² IN2103 – Evaluierung RET (Juli 2021)

³ Gewichtsreduktion durch Polymer-Pelotte vs. TPE-Pelotte (AirFlex, TPE = thermoplastisches Polymer)

Manu-GO

Handgelenksbandage zur
Entlastung und Stabilisierung



INDIKATIONEN

DISTORSION DES HANDGELENKS, TENDOMYOPATHIEN,
POSTOPERATIVE/POSTTRAUMATISCHE REST-
SCHMERZEN UND/ODER -ÖDEME, ARTHROSE

WIRKUNGSWEISE

Kompression¹

- Elastisches 3D-Kompressionsgestrick
- Grad der Kompression durch zusätzlichen Gurt individuell einstellbar

Stabilisierung

- Abnehmbare, anpassungsfähige volare Schiene stabilisiert das Handgelenk und begrenzt schmerzende Bewegungen

Propriozeption

KOMFORT

Anatomische Formgebung

- Frei bewegliche Finger für mehr Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl

Atmungsaktives Gestrick²

Leichte Materialien³

Sicherer Halt

Neuartige Pelottentechnologie

Einfache Handhabung



¹ Daten zur CE-Kennzeichnung

² IN2103 – Evaluierung RET (Juli 2021)

³ Gewichtsreduktion durch Polymer-Pelotte vs. TPE-Pelotte (AirFlex, TPE = thermoplastisches Polymer)

Genu-GO Silistab®

Indikationen

Degenerative posttraumatische oder postoperative Weichteilschädigung des Kniegelenkes und/oder rezidivierender Gelenkerguss

Wirkungsweise




Kompression



Stabilisierung




Propriozeption

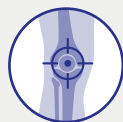

Gezielter Druck

Größen

Verfügbar in sieben Größen

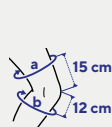

Größen	a	b
0	35 - 37 cm	29,5 - 32 cm
1	37 - 41 cm	32 - 34,5 cm
2	41 - 45 cm	34,5 - 37 cm
3	45 - 50 cm	37 - 39,5 cm
4	50 - 55 cm	39,5 - 42 cm
5	55 - 61 cm	42 - 44,5 cm
6	61 - 67 cm	44,5 - 47 cm

Artikel-Nr. 23420

HMV-Nr. 05.04.01.0140



Malleo-GO

Indikationen

Leichte Verstauchung des Knöchels (akute Phase), postoperative/posttraumatische Restschmerzen und/oder -ödeme, Gelenkinstabilität/-laxität

Wirkungsweise



Kompression



Stabilisierung



Propriozeption

Größen

Verfügbar in sechs Größen



Größen	a
0	16 - 19 cm
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Artikel-Nr. T30020

HMV-Nr. 05.02.01.0073



Die Verfügbarkeit von Genu-GO Silistab® und Malleo-GO kann von Land zu Land variieren, da die örtlichen Zulassungs- oder Freigabeanforderungen für den Verkauf spezifisch sind. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch. Die Klasse der Medizinprodukte, die in diesem Dokument erwähnt sind, ist CE-gekennzeichnet gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Rates.

Epi-GO

Indikationen

Laterale oder mediale Epicondylitis (Tennisarm/Golfarm),
Vorbeugung von wiederkehrenden Tendinopathien (Sehnenleiden)
am Ellenbogen

Wirkungsweise



Kompression



Stabilisierung




Propriozeption



Gezielter Druck

Größen

Verfügbar in sechs Größen

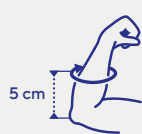

Größen	
0	21 - 23 cm
1	23 - 25 cm
2	25 - 27 cm
3	27 - 29 cm
4	29 - 31 cm
5	31 - 34 cm

Artikel-Nr. T30080

HMV-Nr. 05.08.01.1050



Manu-GO

Indikationen

Distorsion des Handgelenks, Tendomyopathien,
postoperative/posttraumatische Restschmerzen und/oder
-ödeme, Arthrose

Wirkungsweise



Kompression



Stabilisierung



Propriozeption

Größen

Verfügbar in sechs Größen



Rechts/Links	
1	14 - 15 cm
2	15 - 16 cm
3	16 - 17 cm
4	17 - 18 cm
5	18 - 19 cm
6	19 - 20 cm

Artikel-Nr. T30070

HMV-Nr. 05.07.02.0139



Die Verfügbarkeit von Epi-GO und Manu-GO kann von Land zu Land variieren, je nachdem, ob die lokalen Zulassungs- oder Freigabeanforderungen für den Verkauf in diesem Land oder dieser Region spezifisch sind. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch. Die Klasse der Medizinprodukte, die in diesem Dokument erwähnt sind, ist gemäß der Verordnung 2017/745 des Europäischen Rates CE-gekennzeichnet.

IMPRESSUM

Thuasne Deutschland GmbH
Im Steinkamp 12
30938 Burgwedel

Tel. +49 5139 988-0
Fax +49 5139 988-177
E-Mail: kundenservice@thuasne.de
Internet: www.thuasne.de

Geschäftsführer:
Joachim Dehmel, Elizabeth Ducottet,
Delphine Hanton

Handelsregister HRB 205507
Amtsgericht Hannover
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 252968335
Steuer-Nummer: 02624620419

WINGS FOR YOUR HEALTH



Genu-GO Silistab®

Thuasne
120 rue Marius AUFAN · 92300 Levallois - Perret · France

Malleo-GO · Epi-GO · Manu-GO

Thuasne Deutschland GmbH
Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
kundenservice@thuasne.de · www.thuasne.de

Thuasne SAS – SIREN/RCS Nanterre 542 091 186
Capital 1 950 000 euros – 120, rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret (France)



TM134912BDD03_10_2025-01 Fotos: Studio Caterin