

Mit dem einfachen Universalgrößenkonzept und patientenfreundlichen Orthesen, die hohen Tragekomfort, Therapietreue und Patientenzufriedenheit versprechen, hat SLEEQ den Markt revolutioniert. Das Modell SLEEQ MAX bietet als TLS-Orthese zusätzliche stabilisierende Wirkung durch einen Sternalstab.



MODELL	SLEEQ	SLEEQ SFO	SLEEQ SFO PLUS	SLEEQ FLEX	SLEEQ MAX
Art.-Nr.	54640	54650	54655	54660	U5040
HMV	23.14.04.1016	23.14.04.2021	23.14.02.2016	23.15.04.4026	23.15.02.0007

SLEEQ MAX TLSO Indikationen:

Sagittale, koronale, transversale Bewegungseinschränkung; erhöhter intravitärer Druck zur Reduzierung der Belastung von Wirbelsäule und Bandscheibe; mechanische oder disogene Schmerzen im Brust- und Lendenbereich sowie den Extremitäten; postoperative Stabilisierung und Fusion der Wirbelsäule; degenerative Bandscheibenerkrankungen; nach Verletzungen zur Erleichterung der Heilung; Spondylose; Spinalkanalstenose, Spondylolisthese; Laminektomie; Disektomie; Facettensyndrom; Wirbelsäulenschwäche; Arthritis; Verstauchungen und Verspannungen des unteren Rückens; prophylaktische Rückenunterstützung



**SLEEQ Max
TLSO**

Premium-TLS-Orthese zur postoperativen / posttraumatischen Behandlung



Thuasne Deutschland GmbH

Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover · Tel.: +49 511 20119-0 · Fax: +49 511 20119-177 · info@thuasne.de · www.thuasne.de

Alle in diesem Dokument genannten Medizinprodukte sind gemäß der Europäischen Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte CE-gekennzeichnet, sofern sie nicht ausdrücklich als „NICHT CE-MARKIERT“ gekennzeichnet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch.
Update: 03/2025. Thuasne Deutschland GmbH, D-30539 Hannover

Thuasne Deutschland GmbH · Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover
Thuasne USA · 4615 Shepard Street, Bakersfield, CA 93313 USA · 800.432.3466 · Fax: 800.798.2722



TM134912BDD_1.0_2025-03


STABIL ABER SLEEQ!

Starke Stabilisierung bei optimalem Tragekomfort – das ist SLEEQ!

SLEEQ MAX ist das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung. Das Modell kombiniert unser innovatives SLEEQ-Konzept mit einem modernen Orthesendesign. SLEEQ MAX ist eine TLS-Orthese für den postoperativen/posttraumatischen Einsatz, welche eine **maximale Stabilisierung bei minimalem Aufwand für Patient und Arzt ermöglicht**.

Stabilisierendes Drei-Punkt-Konzept

SLEEQ MAX gewährleistet mit Stahlkomponenten, zirkulären Schalen und verstärkten Pelotten eine gute Stabilisierung. Sehr gute Aufrichtung für optimale therapeutische Ergebnisse

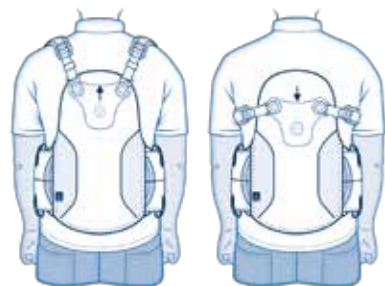

Gurtführung wahlweise über die Schultern oder unterhalb der Achseln



Einfach in der Anwendung, einfach zu tragen

„SLEEQ“ steht für Komfort und unkomplizierte Anwendung. Durch das einfache, ergonomische Gurtsystem, die selbstformenden Kunststoffteile und atmungsaktiven Materialien ist das MAX-Modell für den Patienten besonders angenehm zu tragen

Einfaches Anpassen, maximale Individualisierung

SLEEQ hat im Bereich von Orthesen in Universalgröße Maßstäbe gesetzt. Neu beim MAX-Modell sind jetzt **anpassbare und modulare Komponenten, die individuell auf den Patienten zugeschnitten werden können** sowie die **SnapLock-Höhenjustierung**.

Universalgröße mit InvisAdjust™

- Für einen Taillenumfang von 66 - 137 cm
- Unsichtbarer Feststellmechanismus für eine mühelose Druckeinstellung



Vorderteil mit Stahlsternalstab

- Entlastende Brustbeinpelotte
- Stahlstab mit SnapLock-Höhenjustierung
- Gurthalter für einfaches Anlegen
- Selbstformende stahlverstärkte Bauchpelotte



Modulare Rückenschale


- Variables Gurtsystem; Gurtführung über die Schultern oder unterhalb der Achseln
- Schienenverstärkte, anatomisch geformte Pelotte mit 15 Grad Lordose
- Abrüstbar auf LS-Orthese



Achselgurte für eine maximale Flexionsbegrenzung


Zirkuläre Schale

- Erweiterbare modulare Flügel, Schalen und Seitenpelotten
- Aussparung zur Lockerung der Bandage

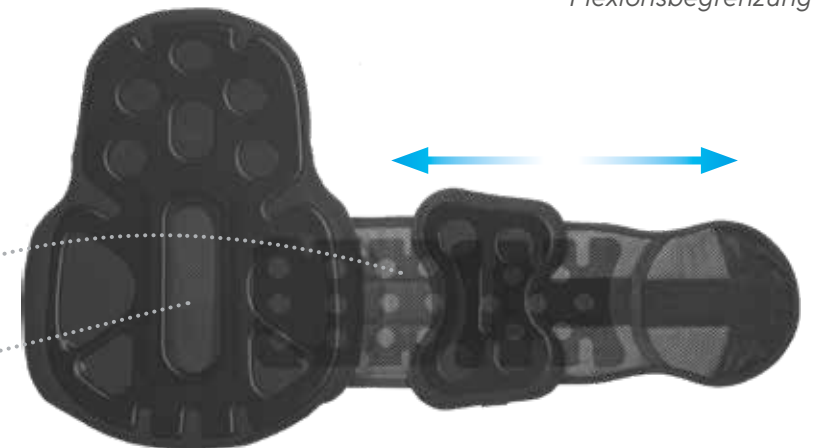

Modifikationen? Jederzeit möglich!

Das durchdachte Design „von Experten für Experten“ ermöglicht vielfältige Modifikationen. Die Schalen lassen sich zuschneiden und thermoplastisch anpassen. Dadurch sind andere Lordosegrade, eine höhere Druckentlastung oder eine stellenweise Ausweitung möglich. Der Stahlstab lässt sich den anatomischen Formen entsprechend biegen, die Flügel dem Taillen-Hüften-Verhältnis entsprechend im Winkel verändern.

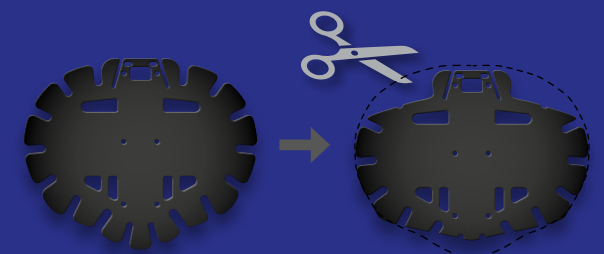

Die Bauchpelotte lässt sich mit einer Schere zurechtschneiden